



-Бичлэг хийх бол "File" цэсэн дээр дараад "Set capture file" гэснийг сонгоод хоосон хавтас уусгэнэ.

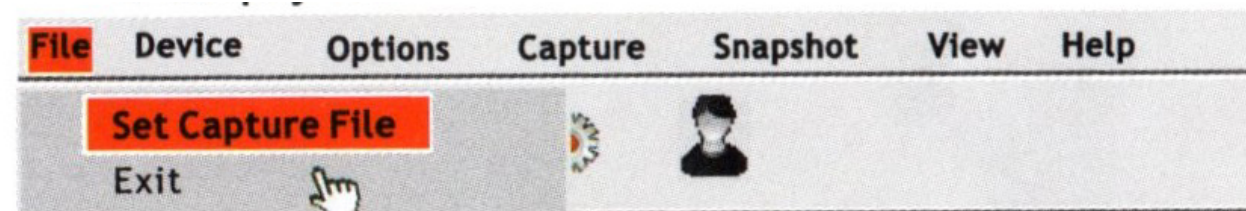

-Доорх зурган дээр дарж бичлэг хийнэ

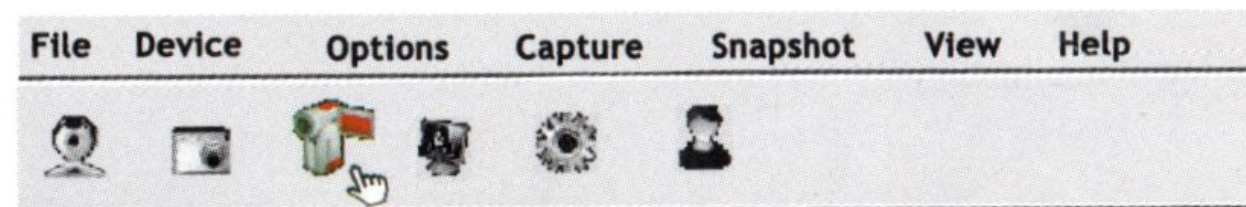


2. OS үйлдлийн системтэй бол

- Дуранг шууд холбоно
- "QuickTime Player" програмаа нээгээд "Photo Booth"
"VLC (VideoLan Client)" уруу орж шууд ашиглаж болно.



ГАРЫН АВЛАГА

Доктор Тун ХХК
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
3-р хороо "Бридж" 32-20
Утас: 11 451155, 88098935
И-мэйл хаяг: info@doctortun.mn
Веб хуудас: www.doctortun.mn

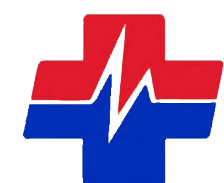

ДОКТОР ТУН ХХК

Ашиглах үедээ дараах зааврыг зайлшгүй дагаж мөрдөнө үү

1. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь усны хамгаалалтгүй бөгөөд усанд норгож угааж цэвэрлэж болохгүй.
2. Зөвхөн спирттэй хөвөн эсвэл зөөлөн даавуугаар арчиж цэвэрлэнэ.
3. Бүтээгдэхүүнийг ашиглахдаа болгоомжтой байна уу.
4. Чихний хэнгэрэгт хүргэж болохгүй.
5. Дуранг ашиглаж байх үед халах нь хэвийн үзэгдэл юм.

Техникийн үзүүлэлт

- 3 өөр оролттой: C кабель & Андроид & Компьютер
- Линзний диаметр: 5.5 мм/ 3.9мм
- Кабелийн урт: 1.5м/2м
- Нягтрал: 640*480, 1280*720
- Дурангийн урт: 2см
- Мэдрэгчийн хэмжээ: 1/9 инч
- Хурд: 30FPS
- Гэрэлтүүлэг: Гараар тохируулах боломжтой
- Ажиллах хүчдэл: USB-р 5V
- Дэмжих үйлдлийн систем: Android/ XP/ Win7/ Win8/ Vista
- Зургийн формат: JPEG
- Бичлэгийн формат: AVI

Гар утастайгаа холбож ашиглах заавар

1. Гар утсан дээрээ программ суулгана
“GooglePlay” аппликэйшнээс "USB CAMERA" эсвэл "AN98" аппликэйшнийг татаж авах эсвэл доорх QR кодыг уншуулаад програмыг суулгаарай.



USB CAMERA



AN98

2. Програмыг нээхэд шууд харагдана.



1. Видео бичлэг
2. Зураг авах
3. Зураг болон бичлэг файлууд
4. Тохиргоо
5. Зураг эргүүлэх

Суурин болон зөөврийн компьютерт холбож ашиглах заавар

1. Windows үйлдлийн системтэй бол

- a. Доорх хаягаар "viewplayсар" програмыг татаж авч суулгана.

<http://www.51scope.cn/files/setup.rar>

- b. Дурангаа компьютерт холбоно
- c. Viewplayсар програмыг нээгээд "Device" дээр дараад "USB.2.0 PC Camera"-г сонгоно.

-Зураг авах бол доорх зурган дээр дарна

